


Adapt Anneau Protecteur Convexe Ovale

Accessoire

L'anneau protecteur convexe Adapt permet de :

- renforcer l'étanchéité entre la stomie et l'appareillage,
- prévenir les risques de fuites,
- appareiller des stomies - ovales,
 - planes, invaginées, rétractées ou dans un pli,
 - situées sur un abdomen ferme, mou ou flasque.

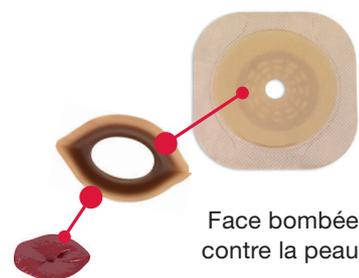

Comment les utiliser ?

Chauffez le protecteur cutané entre vos mains et enlevez les films de protection, en commençant par le film blanc.

- 1 Positionnez l'anneau protecteur convexe directement sur le support (système 2 pièces) ou sur la poche (système 1 pièce), **face plane sur l'appareillage**, en l'ajustant à la découpe.
- 2 Appliquez l'ensemble de l'appareillage du bas vers le haut en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de plis cutanés pour éviter tout risque de fuite.
- 3 Maintenez fermement l'ensemble de l'appareillage quelques secondes.



Questions fréquemment posées

Est-ce que l'on peut étirer l'anneau ?	Il n'est pas recommandé d'étirer l'anneau car il a une forte mémoire de forme.
Est-ce que je peux positionner la face plane de l'anneau directement sur la peau ?	Non. L'anneau doit être positionné face convexe autour de la stomie sinon il perd l'intérêt de la convexité. Positionnez toujours la surface plane de l'anneau sur le support de l'appareillage.
Puis-je utiliser ces anneaux sur des supports plans et convexes ?	Oui. Sur des supports plans une convexité souple modérée est obtenue. Sur des supports convexes, on obtient une convexité ferme profonde. Demandez conseil à votre infirmier(ère) stomathérapeute.
Puis-je empiler, couper les anneaux ?	Oui. Pour un joint plus doux entre les deux anneaux coupés, vous pouvez utiliser quelques pointes de Pâte Adapt.
Puis-je utiliser les anneaux sur une peau endommagée, irritée, suintante ?	Oui. Utilisez un peu de Poudre Adapt pour aider à la cicatrisation et absorber l'humidité d'une peau suintante. Appliquez ensuite l'appareillage.

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67 Service & appel gratuits

assistance.conseil@hollister.com

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex

www.hollister.fr


Ce document est destiné à l'usage des professionnels de santé. Dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I. Fabriqués par Hollister Incorporated. Marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur (maximum 30°C) et de l'humidité, dans son emballage d'origine. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. Edition : dec 2017. Référence: FRO204

Adapt Anneau Protecteur Convexe Rond

Accessoire

L'anneau protecteur convexe Adapt permet de :


- renforcer l'étanchéité entre la stomie et l'appareillage,
- prévenir les risques de fuites,
- appareiller des stomies - rondes ou irrégulières,
 - planes, invaginées, rétractées ou dans un pli,
 - situées sur un abdomen ferme, mou ou flasque.

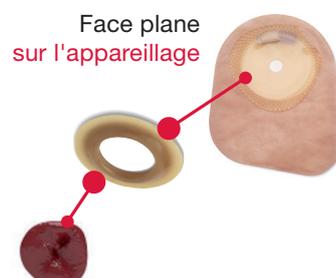

Comment les utiliser ?

Chauffez le protecteur cutané entre vos mains et enlevez les films de protection, en commençant par le film blanc.

- 1 Positionnez l'anneau protecteur convexe directement sur le support (système 2 pièces) ou sur la poche (système 1 pièce), **face plane sur l'appareillage**, en l'ajustant à la découpe.
- 2 Appliquez l'ensemble de l'appareillage du bas vers le haut en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de plis cutanés pour éviter tout risque de fuite.
- 3 Maintenez fermement l'ensemble de l'appareillage quelques secondes.

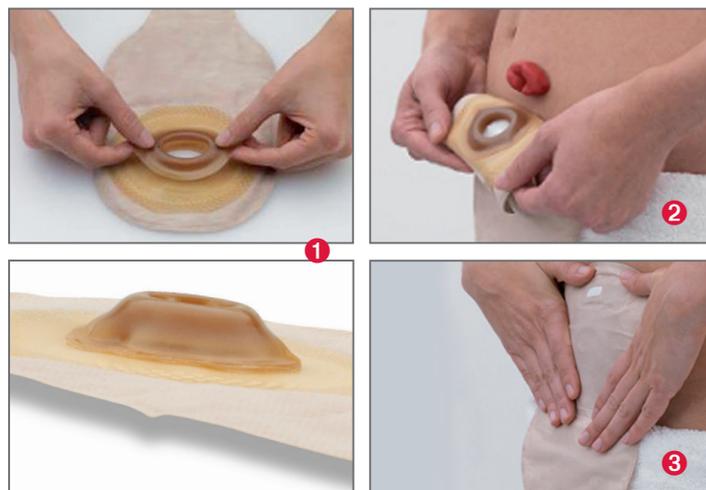

Questions fréquemment posées

Est-ce que l'on peut étirer l'anneau ?	Il n'est pas recommandé d'étirer l'anneau car il a une forte mémoire de forme.
Est-ce que je peux positionner la face plane de l'anneau directement sur la peau ?	Non. L'anneau doit être positionné face convexe autour de la stomie sinon il perd l'intérêt de la convexité. Positionnez toujours la surface plane de l'anneau sur le support de l'appareillage.
Puis-je utiliser ces anneaux sur des supports plans et convexes ?	Oui. Sur des supports plans une convexité souple modérée est obtenue. Sur des supports convexes, on obtient une convexité ferme profonde. Demandez conseil à votre infirmier(ère) stomathérapeute.
Puis-je empiler, couper les anneaux ?	Oui. Pour un joint plus doux entre les deux anneaux coupés, vous pouvez utiliser quelques pointes de Pâte Adapt.
Puis-je utiliser les anneaux sur une peau endommagée, irritée, suintante ?	Oui. Utilisez un peu de Poudre Adapt pour aider à la cicatrisation et absorber l'humidité d'une peau suintante. Appliquez ensuite l'appareillage.

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67 Service & appel gratuits

assistance.conseil@hollister.com

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex

www.hollister.fr

Ce document est destiné à l'usage des professionnels de santé. Dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I. Fabriqués par Hollister Incorporated. Marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur (maximum 30°C) et de l'humidité, dans son emballage d'origine. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. Edition : dec 2017. Référence: FRO204